

Комплект трубок

FlexiPump®

Полный комплект для дозирования

561 101	Комплект для дозирования с внутр. диам. 1,6 мм
561 102	Комплект для дозирования с внутр. диам. 3,2 мм
561 103	Комплект для дозирования с внутр. диам. 4,8 мм
561 104	Комплект для дозирования с внутр. диам. 6,4 мм
561 105	Комплект для дозирования с внутр. диам. 8 мм




шт./уп.
1
1
1
1
1

Силиконовые трубки

561 201	Силиконовые трубки с внутр. диам. 1,6 мм
561 202	Силиконовые трубки с внутр. диам. 3,2 мм
561 203	Силиконовые трубки с внутр. диам. 4,8 мм
561 204	Силиконовые трубки с внутр. диам. 6,4 мм
561 205	Силиконовые трубки с внутр. диам. 8 мм

шт./уп.
5
5
5
5
5

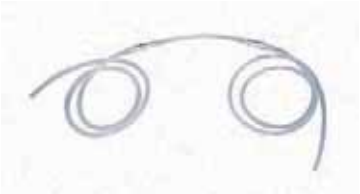

Силиконовые трубки для насоса

561 301	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 1,6 мм
561 302	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 3,2 мм
513 011	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 4,8 мм
561 304	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 6,4 мм
561 305	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 8 мм

шт./уп.
5
5
5
5
5




FlexiPump® Pro

Полный комплект для дозирования + «Y» соединители

562 101	Комплект для дозирования с внутр. диам. 1,6 мм + «Y» соединители
562 102	Комплект для дозирования с внутр. диам. 3,2 мм + «Y» соединители
562 103	Комплект для дозирования с внутр. диам. 4,8 мм + «Y» соединители
562 104	Комплект для дозирования с внутр. диам. 6,4 мм + «Y» соединители
562 105	Комплект для дозирования с внутр. диам. 8 мм + «Y» соединители

шт./уп.
1
1
1
1
1

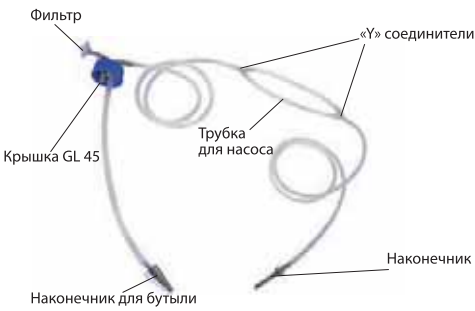

Силиконовые трубки + «Y» соединители

562 201	Силиконовые трубки с внутр. диам. 1,6 мм + «Y» соединители
562 202	Силиконовые трубки с внутр. диам. 3,2 мм + «Y» соединители
562 203	Силиконовые трубки с внутр. диам. 4,8 мм + «Y» соединители
562 204	Силиконовые трубки с внутр. диам. 6,4 мм + «Y» соединители
562 205	Силиконовые трубки с внутр. диам. 8 мм + «Y» соединители

шт./уп.
5
5
5
5
5



Силиконовые трубки для насоса

561 301	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 1,6 мм
561 302	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 3,2 мм
513 011	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 4,8 мм
561 304	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 6,4 мм
561 305	Силиконовые трубки для насоса с внутр. диам. 8 мм

шт./уп.
5
5
5
5
5



Комплекты для дозирования полностью автоклавируются вместе с бутылкой для предотвращения контаминации

ООО «Креатор Лаб»
115533, Москва, проспект Андропова, 22, БЦ «Нагатинский»
Тел. 8 (499) 110-48-08, info@kreatorlab.ru; www.kreatorlab.ru

interscience

Креатор Лаб

FlexiPump®

Насос-дозатор

НОВИНКА!

Дозировать стало проще



interscience

Быстрое дозирование жидкостей

FlexiPump® – это перистальтические насосы для разлива жидких и агаризованных питательных сред. Используются для серийного дозирования питательной среды (напр.: 9 мл в пробирки), агара (напр.: 18 мл в чашки Петри) или любой жидкости (напр.: 90 мл или 225 мл в бутылку или в пакет для гомогенизатора). Компактные, имеют интуитивный интерфейс. Скорость и точность гарантирует эффективную подготовку образцов и разлив питательных сред.

- Две модели:**
- **FlexiPump®** со стандартными функциями
 - **FlexiPump®Pro** для высокой производительности

- Специально для микробиологов**
- 3 режима дозирования
 - продолжительный;
 - дозирование (с предустановленным объемом);
 - мульти-дозирование (с предустановленным объемом и паузой между каждым дозированием);
 - 32 запрограммированных режима работы
 - Поворотная кнопка для удобной навигации
 - Трубки полностью автоклавируются вместе с бутылкой
 - Компактный: всего 16 см шириной

- Дозирование**
- Дозирование жидкости от 50 мкл до 99 л
 - Точность дозирования до 1%
 - Анти-капельная система
 - Соответствует стандартам ISO 6887-1 и ISO 7218

- Простая калибровка**
- Пошаговая инструкция на экране прибора
 - Возможна калибровка по выбранному объему

- Легкое дозирование**
- Удобное дозирование с помощью пистолета Handy gun и вращающейся кнопки
 - Серийные дозирования:

-  – Розлив бульонов и разбавителей в пробирки (9 мл)
-  – Наполнение чашек Петри питательными средами (18 мл)
-  – Распределение буферов в бутылки или пакеты для гомогенизации (225 мл)

- Не требует технического обслуживания**
- Прочный корпус из нержавеющей стали
 - Мощный шаговый двигатель, с неизнашивающимися частями
 - Оснащен высококачественными насосами Watson Marlow

Аксессуары и техническая спецификация

 561 001 Ручной дозатор Handy gun Для точного и комфортного дозирования в пробирки, чашки Петри и бутылки	 561 002 Регулируемый штатив Для дозирования в любую посуду	 507 008 Ножная педаль	 241 090 Штатив для чашек Петри PetriPile® 90 Для удобной транспортировки и хранения. Вмещает до 36 чашек.
 513 015 Штатив для 2,5 л пакетов Для удобного хранения пакетов с готовым к использованию бульоном	 513 020 Трокар. Для подсоединения пакета	 521 000 Принтер	

	 FlexiPump®	 FlexiPump® Pro
Артикул	561 000	562 000
Объем дозирования	От 50 мкл до 99 л	
Пауза в режиме мульти-дозирования	Регулируемая от 0,1 до 99,9 с	
Режим дозирования	продолжительный – дозирование – мульти-дозирование	
Насос Watson Marlow™	Один	Двойной
Точность дозирования с трубкой 3,2 мм	9 мл: 1,8 % – 18 мл: 1 % – 225 мл: 0,5 %	9 мл: 0,9 % – 18 мл: 0,5 % – 225 мл: 0,4 %
В комплекте поставляются трубки диам.	3,2 мм	3,2 мм и 6,4 мм
Скорость распределения	От 1,5 мл/мин до 1,25 л/мин	От 3 мл/мин до 2,5 л/мин
Интерфейс	–	USB, RS 232 для принтера
Экспорт данных	–	Excel™, LIMS
Скорость вращения	От 10 до 550 об/мин	
Внутренний диаметр трубки	От 1 до 8 мм	
Толщина стенки трубки	1,6 мм	
Размеры (Ш × Г × В)	16 × 28 × 21 см	16 × 34 × 21 см
Вес	5,5 кг	5,8 кг
Напряжение	100–240 В, 50–60 Гц	
Внутренний диаметр дополнительных трубок	1,6 мм; 3,2 мм; 4,8 мм; 6,4 мм; 8 мм	
Прочный корпус из нержавеющей стали	✓	
Сделано во Франции	✓	